


とう こつ

# 橈骨動脈可視化装置 アートビュー



橈骨動脈の可視化例

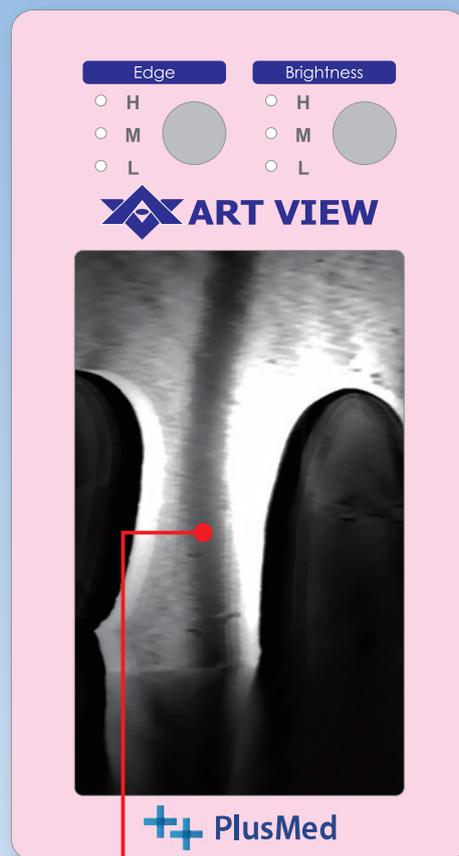

橈骨動脈

生体透過性の近赤外光により、  
橈骨動脈の描出ができる、血管可視化装置です。



フォルテ グロウ メディカル 株式会社

# アートビューの仕組み



近赤外光 (850nm)を  
手首の下から照射し、  
手首を通過した近赤外光を  
上部カメラで撮影して画像化します。  
血中のヘモグロビンに吸収された  
箇所を黒く描出します。

## 製品特長

- 近赤外光を利用して、橈骨動脈を可視化します。
- 血管走行が見られることで、血管穿刺での成功率の向上が期待できます。
- 手首部に近赤外光を照射するだけの、非侵襲的な装置です。



## 製品仕様

製品名	カタログ番号	包装単位	備考
 アートビュー	FPM-RA-000	1台/箱	・光源装置 ・電源アダプタ ・リストフィックス ・フィックスベルト
 フロアスタンド	FPM-AV00-OP2	1台/箱	・バッテリー電源
標準オプション品	カタログ番号	包装単位	備考
 リストフィックス	FPM-AVT0-OP2	1個/箱	
 リストマット	FPM-AVT0-OP3	10枚/箱	

販売名：血管可視化装置アートビュー  
 一般的名称：可搬型手術用顕微鏡  
 届出番号：39B3X10001000003  
 主な仕様：固体撮像素子 有効画素数：1280(H)×1024(V)  
 光源用LED 素子中心波長：850nm  
 内蔵モニター 720(H)×1280(V)  
 外部映像出力 DVI-D画素数：1280(H)×1024(V) 60Hz  
 寸法 約W 110mm, D 65mm, H 229mm  
 質量 約0.9kg

## 総販売元

 **フォルテ グロウ メディカル 株式会社**

〒327-0003 栃木県佐野市大橋町1647  
<http://www.fgm.co.jp/>

### 東京営業所 営業部 (問合わせ先)

〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸51 第一スレートビル5階  
 TEL: 03-3863-1901 FAX: 03-3863-1905

### 製造販売業者 株式会社 プラス・メッド

第3種医療機器製造販売業 (許可番号39B3X10001号)  
 〒780-0083 高知県高知市北御座11番7号  
<http://www.plusmed.co.jp/>

## 取扱販売店

