



内視鏡検査をよりクリア、よりスピーディーに手間いらずで、診断・治療を多様にサポートし、超音波内視鏡検査の注水など幅広い用途に使用できます。

仕 様

型番	WP2S
認証番号	302AGBZX00071000
JANコード	4589770090511
送水方法	ロータリー式
吐水量	副送水口接続時：最大送水量 約250ml/分 鉗子口接続時：最大送水量 約700ml/分 処置具接続時：最大送水量 約80ml/分 ※ポンプヘッドの使用状況と接続装置により異なる
寸法	幅 172mm 奥行 215mm 高さ 174mm（取手倒し時159mm）
重量	約3.6kg
使用環境	電源：AC100-240V 50/60Hz 消費電力：約28-34VA 温度：0℃～35℃ 湿度：35%～75%（結露しないこと）
セット内容	内視鏡用送水装置・・・1 フットスイッチ・・・1 電源ケーブル・・・1 送水タンク・・・1



製品特長

豊富なチューブ


- 送水チューブ（マルチフローシステム）の選択で、鉗子口・副送水口・処置具からの多様な送水用途で活用できます。

安全・時短

- チューブは、個包装で滅菌済みなので安心して使用できます。
- ディスポーザブル製品のため、検査使用後のチューブの面倒なリプロセス工程をする必要がありません。
- フットスイッチの自動停止機能により、約30秒で自動的に送水が停止します。

機能の向上


- ポンプヘッドへのチューブの取付が簡単に行えます。
- 流量調整ダイヤルで、最適な送水コントロールが可能です。
- 付属の送水タンクのサイズが選べます。

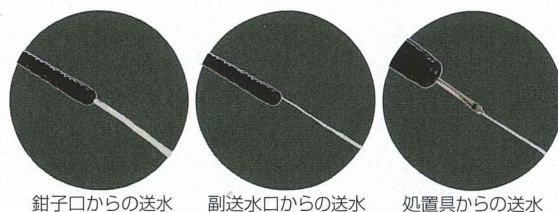


鉗子口からの送水

副送水口からの送水

処置具からの送水

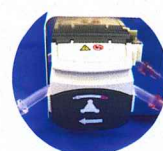

簡易なチューブ取付

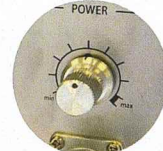

流量調整ダイヤル



選べる送水タンク（角型4L／角型2L／アック型2L）

製造販売元



ORTメディカル株式会社


本社営業所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-19 竹生第2ビル9階
TEL:045-534-7015 / FAX:045-534-7760


大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル5-E
TEL:06-6476-7300 / FAX:06-6476-7289

Q <https://www.ort-medical.jp>

マルチフローシステム

No.	送水用途	品名	型式	入数/箱	希望小売価格	JANコード	全長	備考
①	副送水口	マルチフロー-S	MF-WPU-SA	10本	6,300円	4547319140875	約2,000mm	1日使用
②	副送水口・ 鉗子口兼用	マルチフロー-BY	MF-WPU-BYA	10本	6,300円	4547319140882	約2,500mm	1日使用
③	副送水口	サブチャンセルコネクタ	MF-WVA	50本	16,000円	4547319140851	約30mm	単回使用
④	副送水口	ウォーターチューブ	AF-WV(逆止弁)	50本	16,000円	4547319805835	約30mm	単回使用

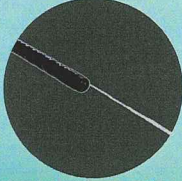


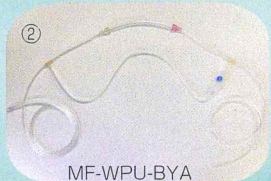

or


+

or



No.	送水用途	品名	型式	入数/箱	希望小売価格	JANコード	全長	備考
⑤	鉗子口	ウォーターチューブ	OF-WPUA	10本	6,300円	4547319140035	約2,300mm	1日使用
②	副送水口・ 鉗子口兼用	マルチフロー-BY	MF-WPU-BYA	10本	6,300円	4547319140882	約2,500mm	1日使用
⑥	鉗子口	ウォーターチューブ	AF-WT 逆止弁一体型	50本	25,000円	4547319805804	約1,800mm	単回使用
⑦	鉗子口	ウォーターチューブ	AF-WT 逆止弁一体型ショート	50本	22,500円	4547319805880	約950mm	単回使用

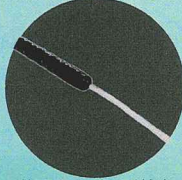

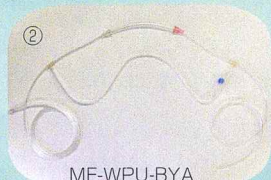
or


+


No.	送水用途	品名	型式	入数/箱	希望小売価格	JANコード	全長	備考
⑧	処置具用	マルチフロー-ESD	MF-WPU-E	10本	18,000円	4547319140868	約3,850mm	単回使用
⑨	処置具用	マルチフロー-ESD-F	MF-WPU-ESD-F	10本	18,000円	4547319141186	約3,850mm	単回使用
④	処置具用	ウォーターチューブ	AF-WV(逆止弁)	50本	16,000円	4547319805835	約30mm	単回使用

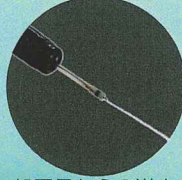


+


- 1)ご使用前に必ず添付文書をご一読ください。
 2)包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
 3)水濡れに注意し、直射日光を避け高温多湿の場所には保管しないでください。
 4)送水は、必ず内視鏡機器を起動させた状態で行ってください。
 5)本製品は再使用しないでください。

一般的名称：送気送水チューブ
 販売名：ウォーターチューブ
 届出番号：09B1X00004000129

製造販売元 **FGM** フォルテ グロウ メディカル 株式会社

販売元

ORTメディカル株式会社

本社営業所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-19 竹生第2ビル9階
 TEL:045-534-7015/FAX:045-534-7760
 大阪営業所 TEL:06-6476-7300/FAX:06-6476-7289